



ADVANCED DOUBLE ELECTRIC REPLACEMENT PARTS KIT

Congratulations on the birth of your baby! Thank you for choosing Evenflo Feeding to support you on your breastfeeding journey. *Please refer to your pump manual for more detailed instructions and warnings.*

For more information about breastfeeding or pumping, contact a lactation expert or your physician. If you have questions about the performance or operation of your pump, please contact our Parent's Ally Resource Center.

USA/Canada: 1-855-EFI-BABY (334-2229)

www.evenflofeeding.com

Mexico: 01-800-706-12-00

www.evenflofeeding.com.mx

Important Safeguards and Warnings

- DO NOT allow small children or pets to play with these products. These parts may pose a choking or strangulation hazard.
- DO NOT use flange insert if your nipple is larger than the flange insert's center opening.
- If you are experiencing engorgement, prevent possible injury by discontinuing use of this pump and consulting a medical provider.
- Pump contains small parts which could cause a child to choke. Keep pump parts and accessories out of children's reach.
- Breast pumps are personal care items, for one user only.

Limited Warranty

- These parts are covered by a 90 day limited warranty; for further details please refer to your pump instruction manual.

Identification of Parts



Bottle



24.5-mm Flange Insert
28.0-mm Flange Insert



30.5mm Flange



Tubing Adapter



Diaphragm



Valve



Tubing



Diaphragm Cap



Sealing Disc



Bottle Cap Ring



Membrane

Before Using These Pump Parts

Before using these parts read your pump Manual. Sanitize all parts in this kit EXCEPT tubing adapter, tubing, and diaphragm cap. Refer to your pump manual for detailed instructions on how to sanitize parts, as well as use and care instructions of these parts.

.....



TROUSSE DE PIÈCES DE RECHANGE POUR TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE DOUBLE À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Félicitations pour la naissance de votre bébé! Merci d'avoir choisi Evenflo Feeding pour vous accompagner dans votre cheminement en matière d'allaitement maternel. ***Veuillez consulter le manuel de votre tire-lait pour obtenir des instructions détaillées et les mises en garde.***

Pour de plus amples informations concernant l'allaitement ou le tirage du lait maternel, contacter un expert en lactation, un médecin ou visiter le site Web indiqué plus bas. Pour toutes questions concernant la performance ou le fonctionnement de ce tire-lait, contacter le centre de ressources « Parent's Ally ».

Pour le Canada et les États-Unis: 1-855-EFI-BABY (334-2229), ou visitez notre site en ligne à www.evenflofeeding.com.


Mesures de sécurité et avertissements importants

- NE PAS permettre à de petits enfants ou à des animaux domestiques de jouer avec le tire-lait, l'entonnoir, l'adaptateur CA, etc. Ces pièces peuvent Présenter un danger d'asphyxie ou d'étranglement.
- NE PAS utiliser la doublure de l'entonnoir si le mamelon est plus grand que l'orifice central de la doublure de l'entonnoir.
- Si vous souffrez d'engorgement, évitez toute blessure éventuelle en cessant d'utiliser ce tire-lait et en consultant un fournisseur de soins médicaux.
- Ce tire-lait comporte des petites pièces qui pourraient provoquer l'étranglement d'un enfant. Gardez les pièces du tire-lait hors de la portée des enfants.
- Les tire-laits sont des objets d'hygiène personnelle, à être utilisés par une seule personne.

Garantie Limitée

- Ces pièces sont couvertes par une garantie limitée de 90 jours; pour plus de détails, veuillez vous référer à votre manuel d'utilisation pour le tire-lait.

Identification des pièces

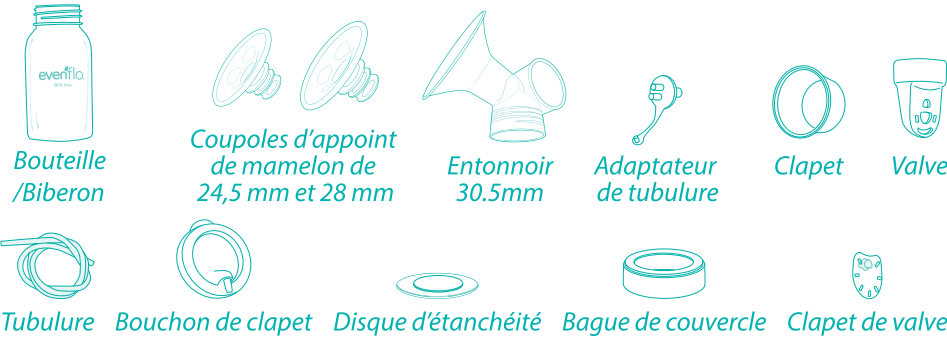

Avant d'utiliser ces pièces pour tire-lait

Avant d'utiliser ces pièces, veuillez lire le manuel pour le tire-lait. Veuillez désinfecter toutes les pièces de cette trousse SAUF l'adaptateur de tubulure et le capuchon de la membrane. Référez-vous à votre manuel du tire-lait pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de désinfecter les pièces, ainsi que l'utilisation et les instructions d'entretien pour ces pièces.



KIT DE REPUESTOS DE EXTRACTOR ELÉCTRICO DOBLE ADVANCED

¡Felicidades por el nacimiento de tu bebé! Gracias por elegir Evenflo y permitirnos acompañarte a lo largo de tu lactancia. **Para información más detallada, consulta las instrucciones y advertencias del extractor.**

Si desea obtener información adicional sobre la alimentación con leche materna o sobre cómo extraer la leche materna, comuníquese con un experto en lactancia, con su médico o visite uno de los sitios web que se indican a continuación. Si tiene preguntas acerca del rendimiento o funcionamiento de este extractor de leche, por favor comuníquese con el Centro de Recursos Parent's Ally.

EE.UU./Canadá: 1-855-EFI-BABY (334-2229),
o visítenos en línea en www.evenflofeeding.com.
México: 01-800-890-32-40,
o visítenos en línea en www.evenflofeeding.com.mx.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Proteja el cable de alimentación eléctrica y el cable del Adaptador de ca/cc. Coloque los cables de manera que no sean aplastados por artículos colocados sobre ellos y en un lugar donde las personas no caminen sobre ellos.
- NO use el inserto de la copa si su pezón es más grande que la abertura central del inserto de la copa.
- Si experimenta ingurgitación mamaria, deje de usar el extractor y consulte a un proveedor de atención médica para evitar posibles lesiones.
- El extractor contiene partes pequeñas que podrían causar que un niño se asfixie. Mantenga las partes y los accesorios del extractor fuera del alcance de los niños.
- Los extractores de leche son artículos de uso personal y, por lo tanto, sólo deben ser empleados por una persona.

Garantía Limitada

- Estos repuestos tienen una garantía limitada de 90 días. Para mayor información consulte el instructivo de su extractor.

Identificación de las piezas



Botella



Insertos de copa de
24.5 mm y 28.0 mm



Copa
30.5mm



Adaptador
de manguera



Diafragma



Válvula



Manguera



Tapa de diafragma



Disco sellador
para botella



Anillo rosca



Membrana

Antes de usar los repuestos del extractor

Antes de usar estos repuestos lee cuidadosamente el instructivo del extractor. Desinfecta todas las partes que conforman este kit a excepción del tubo, el adaptador del tubo y la tapa del diafragma. Consulta el instructivo del extractor para mayor información acerca del proceso de limpieza de las partes, usos y cuidados.